

La rivoluzione i-limb ultra con rotazione del pollice elettrica



Design avanzato:


- Spostamento automatico o manuale del pollice in posizione
- 24 funzioni di presa disponibili
- La rotazione automatica del pollice consente lo spostamento preciso in posizione di presa a tripode o a pinza
- L'innesto di sicurezza previene il sovraccarico del pollice

Funzioni personalizzate biosim:


- Il software biosim consente di selezionare e personalizzare la funzione
- Vari-grip consente una maggiore intensità di presa dito per dito
- Cinque strategie di controllo disponibili, due a dito doppio e tre a dito singolo
- Con la funzione auto-grasp, gli oggetti afferrati non scivolano accidentalmente
- Posizione naturale personalizzata della mano con timer regolabile
- Taratura automatica del trigger per co-contrazione, impulso doppio e triplo
- 24 opzioni di presa:
apertura di precisione a pinza standard, precisione standard, chiusura a pinza, apertura di precisione a pinza pollice, chiusura precisione a pinza pollice, apertura a tripode standard, chiusura a tripode standard, apertura a tripode pollice, chiusura a tripode pollice, posizione continua pollice, posizione rapida pollice, presa laterale, indicare con l'indice, gesto personalizzato, rotazione pollice, palmo aperto, presa personalizzata, cilindrica, mouse, trigger singolo, trigger doppio e trigger pollice, afferrare, indossare/togliere, stretta di mano

Opzioni prodotto:


- Due misure: medium e small
- Due colori: nero o neutro
- Vari-grip consente un'intensità di presa variabile dito per dito
- Le misure della mano sono le stesse di i-limb ultra
- Collegamenti disponibili con il polso:
Quick Wrist Disconnect, Multi-flex Wrist, Flex Wrist e Wrist Disarticulation

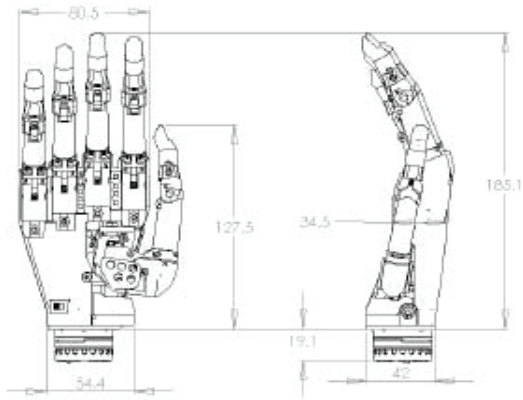


Medium, QWD

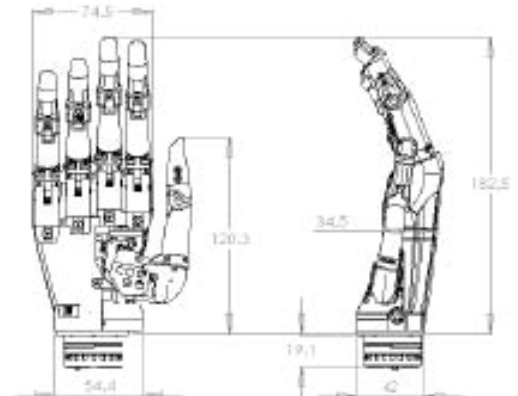

Small, QWD

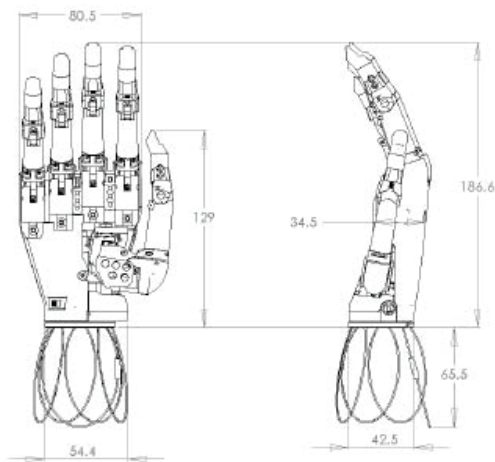

Medium, WD

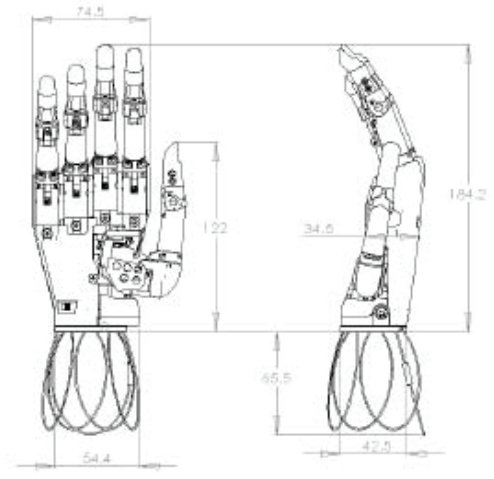

Small, WD

Informazioni tecniche

Tensione	7,4 V (nominale)
Corrente max	5 A
Capacità batteria	Polimero di litio ricaricabile; 7,4 V (nominale); capacità 2400 mAh; capacità 1300 mAh
Limite di carico max della mano (limite statico)	90kg / 198lb
Capacità di carico del dito (limite statico)	32kg / 71lb
Tempo dalla posizione di apertura alla presa di potenza massima	1,2 secondi
Peso del dispositivo	Peso con QWD 507g (small) e 515g (medium) Peso con unità WD 443g (small) e 451g (medium)

Forze	Senza vari-grip	Con vari-grip
Forza presa di potenza	10,2kg (100N)	13,9kg (136N)
Forza presa a pinza laterale	2,1kg (21N)	3,5kg (35N)

Numero prodotto	Descrizione
PL238000	Neutro medium Dx
PL23900	Neutro medium Sx
PL240000	Neutro small Dx
PL241000	Neutro small Sx
PL242000	Nero medium Dx
PL243000	Nero medium Sx
PL244000	Nero small Dx
PL245000	Nero small Sx

Numero prodotto	Descrizione
PL262000	Wrist Disarticulation neutro medium Dx
PL263000	Wrist Disarticulation neutro medium Sx
PL264000	Wrist Disarticulation neutro small Dx
PL265000	Wrist Disarticulation neutro small Sx
PL266000	Wrist Disarticulation nero medium Dx
PL267000	Wrist Disarticulation nero medium Sx
PL268000	Wrist Disarticulation nero small Dx
PL269000	Wrist Disarticulation nero small Sx